



**CONTACT
SÉCURITÉ**

DECEMBRE 2004

COLLIERS CERVICAUX RIGIDES 2 PARTIES

Réf. CCR & CCRP


avec ornice tracheal et ornice carotidiens



Collier adulte/enfant

- ▶ Existe en 3 tailles
 - Taille 1 : Réf. M2R/S1
 - Taille 2 : Réf. M2R/S2
 - Taille 3 : Réf. M2R/S3
- } couleur rouge

Mise en place des 2 parties du collier

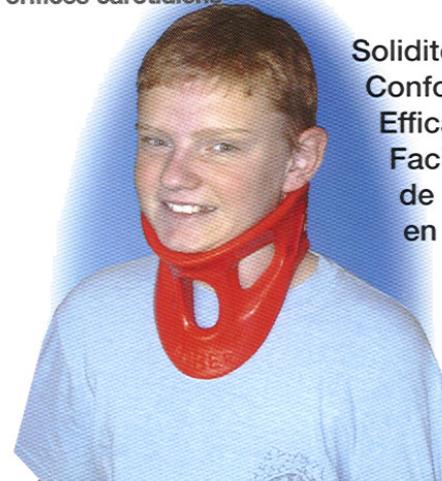

Solidité
Confort
Efficacité
Facilité
de mise
en place

Sacoche de transport
de l'ensemble
des colliers



Modèle pédiatrique.
Couleur rose, bleu, vert.




Sacoche de Transport des colliers

Modèle enfant/adulte.
Couleur rouge.

Collier pédiatrique



- ▶ Existe en 3 tailles.
- Taille 1 : Rose Réf. M2R/SP1
- Taille 2 : Bleu Réf. M2R/SP2
- Taille 3 : Vert Réf. M2R/SP3

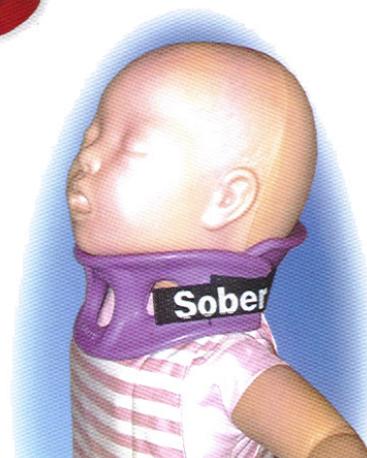

LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

e-mail : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : <http://www.contactsecurite.fr>

S.A. au CAPITAL DE 80 000 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 331 B – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115



COLLIERS CERVICAUX RIGIDES 2 PARTIES Réf. CCR et CCRP

Description

- Collier constitué de 2 parties (antérieure et postérieure) en mousse injectée.
- Réglage type velcro - Disponible en 3 tailles qui se modulent entre elles.
- Les parties postérieures et antérieures sont anatomiques.
- La partie antérieure comprend 3 ouvertures permettant la prise du pouls, déglutition sans aucune gêne, possibilité d'oxygéner un patient ayant déjà été trachéotomisé.
- Il permet en réglant la hauteur de la partie antérieure, de faire une bonne rétroflexion.
- De part sa matière, il présente une bonne flottabilité (possibilité de pose en milieu aquatique). Indications Traumatisme crânio-cervicaux.
- Utilisation :
S'utilise en urgence sur patient allongé ou non. Mise en place
- 1- Pose de la partie postérieure après avoir choisi la taille.
- 2- Pose de la partie antérieure
- 3- Fermeture des sangles latérales auto agrippantes.
- Composition :

Polyuréthane

Polypropylène

Polyamide

Entretien Lavable à l'eau. Utilisation de n'importe quel antiseptique.

